




ADVANCED TISSUE-MANAGEMENT

The easy way to aesthetics.

RESODONT®



VYSOKÁ KVALITA POSKYTUJE BEZPEČÍ

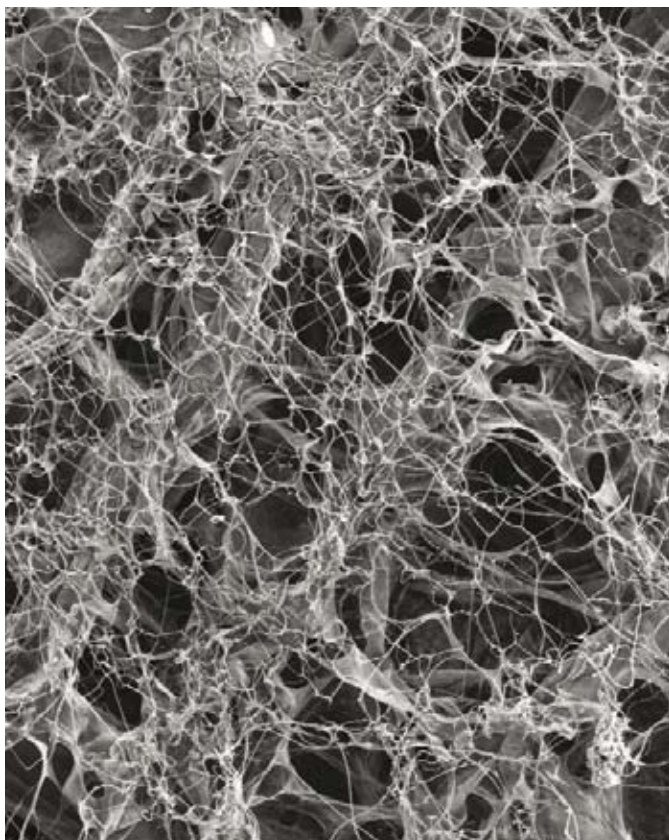

speciální mikrostruktura: 500násobně zvětšený snímek REM

RESODONT® se vyrábí speciální metodou z kolagenu zvláště vysoké čistoty. Použitím kolagenu koňského původu je zaručena maximální míra bezpečnosti produktu ⁽¹⁾. Kolagen se úplně vstřebá ⁽²⁾. Tím odpadá druhý zákrok, který je nutný při použití nevstřebatelných membrán.

(1) Ph.Eur. – Příloha k Evropskému lékopisu – Dodatek 2000 (2000):

5.2.8 Minimalizace rizika přenosu původců zvířecí spongiformní encefalopatie humánními a veterinárními léčivými přípravky.

Ph.Eur. – Dodatek 2000, Příloha

(2) Stemberger A., Lehner S., Odar J. (1999): Biodegradovatelné chirurgické

krytí ran – Stabilita, elasticita, odolnost v tahu jako ukazatelé kvality.

Autorizovaný překlad Ellipse 15 (4): 101–105


Klinické použití RESODONT®

»Membrána se používá v dentální, ústní, čelistní a obličejové chirurgii, zejména při řízené kostní regeneraci (guided bone regeneration GBR) ke krytí defektů a zajištění augmentačního materiálu.



Oblast použití zahrnuje lokální augmentaci před nebo při inzerci enoseálních implantátů, krytí faciální stěny čelistní dutiny a malých perforací sliznice čelistní dutiny při operacích sinus lift a krytí zubních lůžek po extrakcích ...

... V průběhu hojení ran nedocházelo k infekcím ani reakcím na cizí tělesa, bariérová funkce byla ve všech případech dostatečná pro nerušenou konsolidaci kosti.



Při expozici membrány z důvodu dehiscencí není indikováno okamžité odstranění, protože důsledným dezinfekčním výplachem lze dosáhnout sekundární epitelizace membrány, aniž by byl narušen augmentát pod ní.«

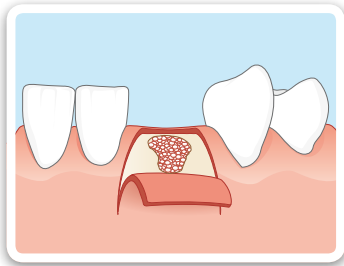


GBR (guided bone regeneration) s RESODONT®

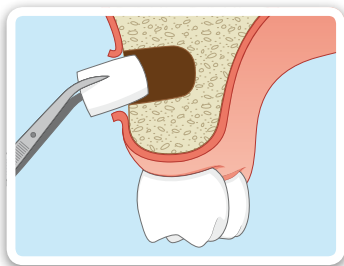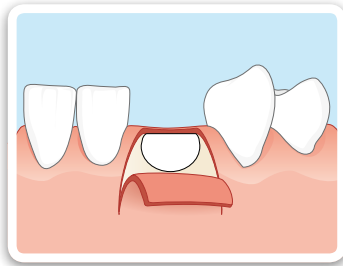

Použití RESODONT® při dostavbě defektu čelisti

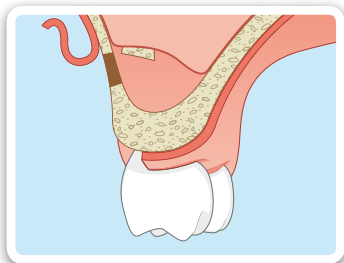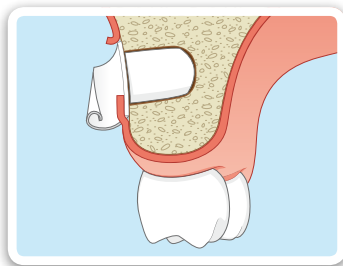

Použití RESODONT® při operacích sinus liftu

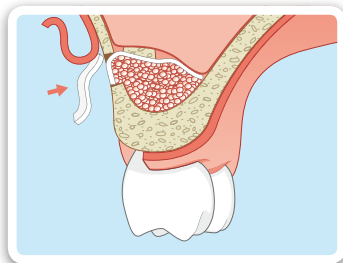**Vlastnosti:**

- ▶ oboustranně použitelný
- ▶ není nutná fixace
- ▶ rychlé, jednoduché přistřížení na správný tvar a aplikace
- ▶ rychlá integrace do okolní tkáně
- ▶ osteokonduktivní
- ▶ angiokonduktivní
- ▶ RESODONT® je vstřebatelný – druhý zákrok k odstranění membrány není nutný
- ▶ podporuje hojení rány
- ▶ usnadňuje přichycení buněk
- ▶ RESODONT® má stabilní strukturu a zachovává si ji i ve vlhkém stavu

Bariérová funkce RESODONT® brání prorůstání vazivové tkáně, Zároveň ale kvalita povrchu membrány umožňuje porůstání buňkám vytvářejícími kost.

Formy podávání a velikosti balení

RESODONT®, sterilně balený, je k dostání v těchto velikostech balení:

REF	Rozměry	VE
RD2502	(S) 22 x 25 mm (5,5 cm ²)	1 Membrána
RD3503	(M) 32 x 25 mm (8 cm ²)	1 Membrána
RD0703	(L) 64 x 25 mm (16 cm ²)	1 Membrána



Formy podávání a velikosti balení

RESODONT®, sterilně balený, je k dostání
v těchto velikostech balení:

REF	Rozměry	VE
RD2502	(S) 22 x 25 mm (5,5 cm ²)	1 Membrána
RD3503	(M) 32 x 25 mm (8 cm ²)	1 Membrána
RD0703	(L) 64 x 25 mm (16 cm ²)	1 Membrána



RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany
Tel. +49 9128 / 91 15 0 Fax +49 9128 / 91 15 91 infomail@resorba.com www.resorba.com
www.diedentalbox.com

CE 1275

LGAC InterCert
Zertifiziertes QM-System
EN ISO 15485:2003 + AC:2007

LGAC InterCert
Zertifiziertes QS-System
Medizinproduktehersteller
93/42/EWG Anhang II